


CATÁLOGO DE
PRODUTOS

KIT LINHAS DE SANGUE

ARTERIAL E VENOSA

Allmed
Pronefro BR

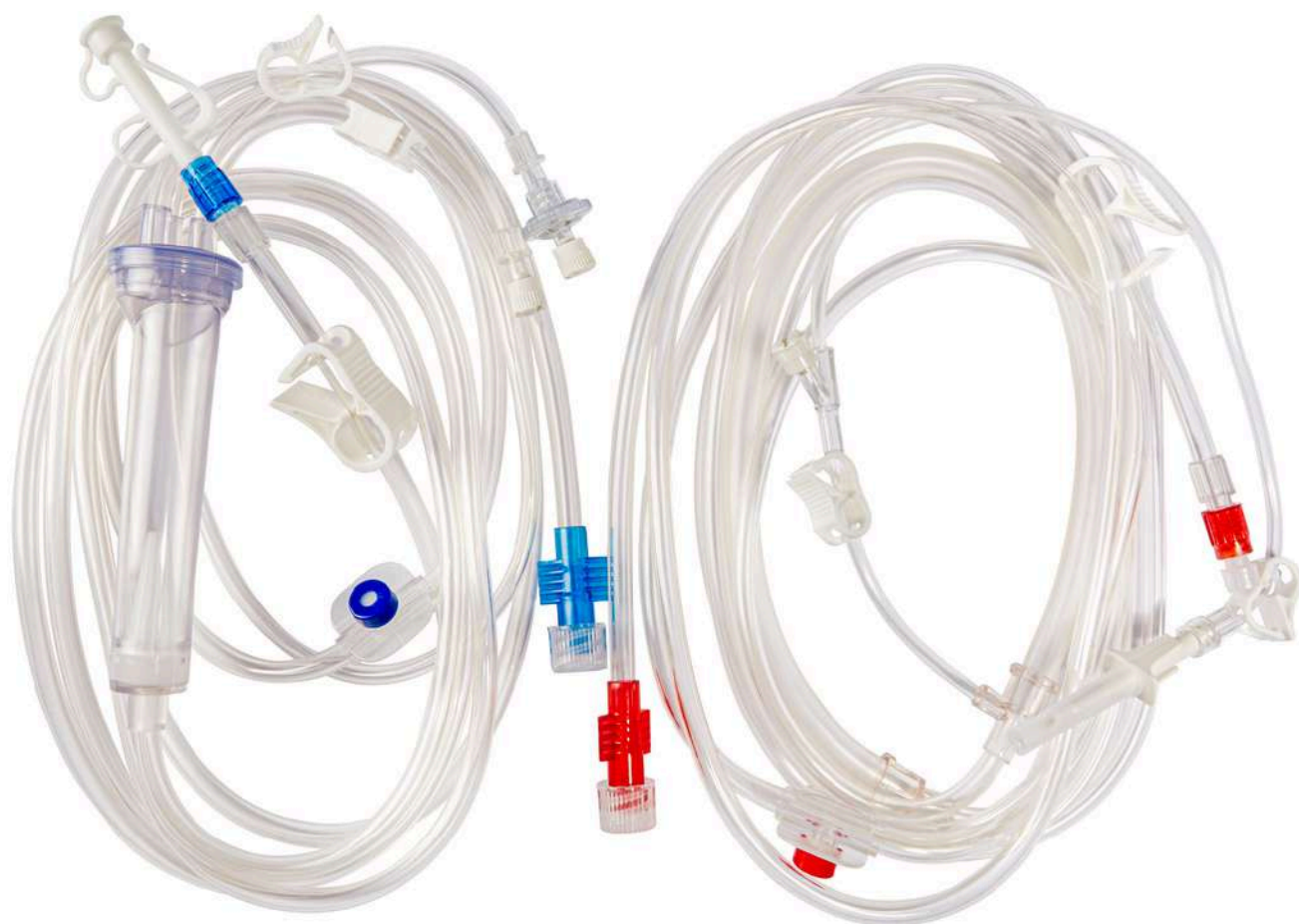

KIT LINHAS DE SANGUE


A Allmed Pronefro oferece uma linha completa de produtos de alta qualidade para atender às necessidades de clínicas e hospitais. Nossa gama de Kit de Linhas de Sangue inclui:

- **KIT Linhas de Sangue Arterial**
- **KIT Linhas de Sangue Venosa**

Oferecemos soluções específicas para cada tipo de tratamento, nas seguintes apresentações:

- **Adulto**
- **Pediátrico**

Todos os produtos são certificados e aprovados conforme os rigorosos padrões da Farmacopeia Europeia.

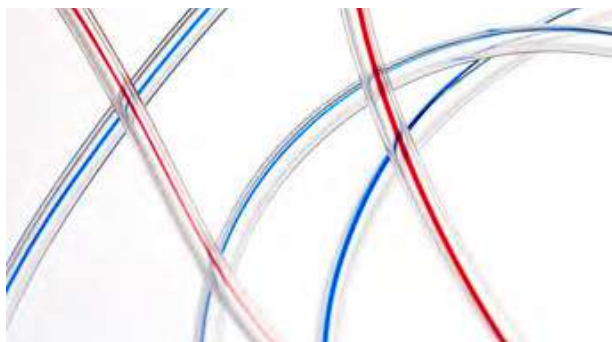

Tubo de sangue é feito de material de PVC de grau médico, um material livre de látex.



Conectores do paciente: melhor aderência na parte rotativa para uma conexão segura ao acesso vascular do paciente



Grampos pequenos e grandes com características ergonômicas ideais e adequados para uso eficaz em todas as dimensões de tubos disponíveis. Local de injeção: proteção maior para os dedos, sem látex.



Conectores do dialisador: conectores em formato de asa garantem um travamento seguro nas portas do dialisador



Conector recirculador: pode conectar linha venosa e arterial para recirculação com possibilidade de ser pendurado



Com Catabolha e ramal para medir a pressão venosa Dialine


KIT LINHAS DE SANGUE

Os Kits trazem praticidade para o tratamento renal. Isolador de Pressão e Tampa luer macho, embalados em papel grau cirúrgico e esterilizados. O Kit de Linhas de Sangue Allmed Pronefro contém os seguintes produtos em uma única embalagem:

- **1 Linha arterial com ramal para entrada de Soro de 140cm** com perfurador na extremidade, pronto para perfurar a bolsa de soro. Esse ramal ainda possui uma **entrada em "Y"** a qual permite à equipe fazer a transfusão de sangue, introdução de medicamentos e outros procedimentos, sem a necessidade de uma nova intervenção no paciente.
- **1 Linha Venosa Universal;**
- **1 Isolador de pressão;**

KIT LINHA ARTERIAL E VENOSA

***Disponíveis para todos os modelos de máquinas, com seguimento de bomba de 6mm e 8mm.**

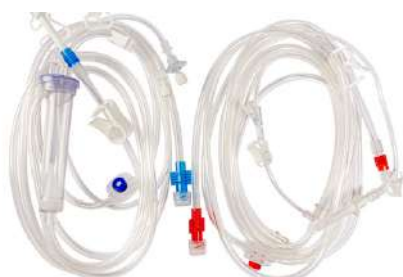

6mm - REF:71AV/00042BP

Composto por uma linha arterial 6mm com Extensão de Soro com Perfurador, Linha Venosa com Catabolha e Isolador de Pressão



8mm - REF:71AV/00044BP

Composto por uma Linha Arterial 8mm com Entrada para Soro e Ramal de Heparina, Linha Venosa com Catabolha e Isolador de Pressão



8mm - REF:71AV/00046BP

Composto por uma linha arterial 8mm sem Catabolha com Entrada para Soro, Ramal Pré Bomba para Monitorar Pressão Arterial e Ramal de Heparina, Linha Venosa com Catabolha e Isolador de Pressão



8mm - REF:71AV/00314BP

Composto por uma linha arterial 8mm sem Catabolha com Entrada para Soro, com Perfurador e Ramal de Heparina, Linha Venosa com Catabolha e Isolador de Pressão



8mm - REF:71AV/00184BP

Composto por uma linha arterial 8mm sem Catabolha com Extensão de Soro com Perfurador, Ramal Pré Bomba para Monitorar Pressão Arterial e Ramal de Heparina, Linha Venosa com Catabolha e Isolador de Pressão

- FABRICAÇÃO EM PVC GRAU MÉDICO
- ATÓXICO E LIVRE DE LÁTEX
- ARTERIAL E VENOSA
- SEGMENTO DE BOMBA DE 6MM / 8MM
- CERTIFICADAS E APROVADAS CONFORME FARMACOPEIA EUROPEIA



+55 41 3059-5757

comercial@allmedgroup.com.br

www.allmedgroup.com.br

Allmed Pronefro BR
Rua Matheus Pereira de Carvalho, 878 Pinhais
| PR | Brasil
CEP: 83323-220

Fabricado por:
Allmed Medical GmbH
Rua Mittelbacher, 18
01896 Pulsnitz | Alemanha

Allmed
Pronefro BR