


KIT PARA HDF

Linhas de infusão

Kit 8mm pré-bomba + conjunto de tubulação para HDF - hemodiafiltração DIALINE

71AV/0047HDF

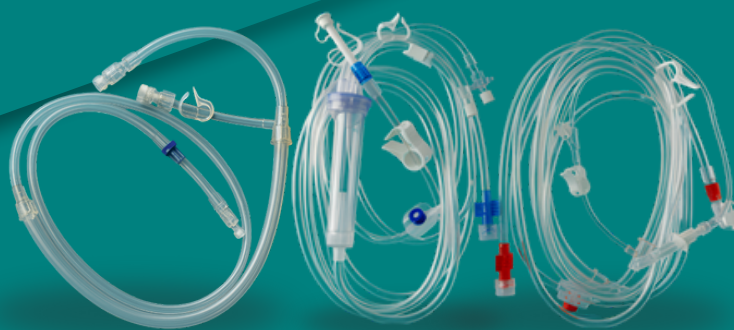

Robustos, confiáveis, adaptáveis

Fáceis de usar, com tecnologia que você pode confiar, nossos sistemas de tubos para diálise oferecem a segurança que você precisa para fornecer um atendimento médico de primeira classe.

Entendemos que os sistemas de tubos são a linha de frente no cuidado renal. É por isso que os nossos, incluindo as linhas livre de ftalatos e as linhas de sangue esterilizadas por óxido de etileno, são projetados com três objetivos essenciais: desempenho clínico, facilidade de uso por profissionais de saúde e compatibilidade com máquinas.



A Allmed utiliza materiais biocompatíveis e adotamos tecnologias avançadas de extrusão, montagem e testes de vazamento para um fluxo sanguíneo constante, suave e não reativo. Desde a rigidez e comprimento dos tubos até o design das pinças, nossos sistemas de tubos são criados pensando no usuário. Testes rigorosos garantem que sejam os sistemas mais ergonômicos do mercado.

Linhas de sangue Arterial e Venosa

Linhas de infusão

A Allmed projeta tubos de sangue para se ajustarem especificamente a cada máquina individual, com configurações padrão ou personalizadas para atender às necessidades dos usuários. Acessórios, como linhas de infusão, tubos extensores, coletores de sangue, etc., podem ser incluídos e também estão disponíveis separadamente como acessórios.



Conectores: melhora a aderência na parte giratória para conexão suave e segura ao acesso vascular do paciente.



Pinças: pequenas e grandes, com características ergonômicas ideais, adequadas para o uso eficaz em todas as dimensões de tubos disponíveis. Local de Injeção: proteção maior para os dedos, livre de látex.



Conectores do dialisador: conectores em forma de asa garantem encaixe seguro nas portas do dialisador.



Conector de recirculação (recirculador): pode conectar a linha venosa e arterial para recirculação, com possibilidade de ser pendurado ou permitir a recirculação se caso for necessário enquanto o paciente está em diálise.



Catolha: disponíveis em todos os tamanhos e modelos, rígidas ou flexíveis, com entrada/saída única ou múltipla.

Especificação do dispositivo médico:

A “linha de sangue”; ou conjunto para hemodiálise hemodiafiltração(HDF) online, é o sistema de tubos e conectores que permite a circulação do sangue do paciente fora do corpo, através da máquina de diálise, para ser filtrado e limpo. É um conjunto crucial para a realização destes tratamentos, garantindo a segurança e eficiência da terapia.

As Linhas de Sangue são projetadas para transportar o sangue através de um circuito extracorpóreo em paciente com insuficiência renal aguda ou crônica. O dispositivo é de uso único, compatível com máquinas de diálise e circuito de sangue extracorpóreo apropriados. Quando conectado corretamente a um hemodialisador/capilar, reservatório de dialisato e máquina de diálise, é adequado em pacientes com insuficiência renal. Garantindo uma filtragem e remoção de toxinas e excesso de fluidos adequados.

Kit 8mm pré-bomba + conjunto de tubulação para HDF - hemodiafiltração DIALINE

- O kit é um item de **uso único**, ou seja, deve ser descartada após cada sessão de diálise para evitar infecções cruzadas.



****Linhas extra transparentes: visibilidade total do trajeto do fluido.**